


RAVIMIKAPP KÜLMIKUGA MLK-65F

Merianto ISO moodulsüsteemil põhinev külmikuga ravimikapp **MLK-65F** on välja arendatud arvestades meditsiinitöötajate vajadust universaalse ravimikapi järele. Lukustatav ravimikapp on kaheosaline ja sisaldab eraldi lukustatavat metallist seifi. Kapi ülaosa on võimalik komplekteerida vastavalt soovile, kasutades ISO moodulsüsteemi 600x400mm korve või klaasriiuleid. Ravimikapi alaosas paikneb meditsiiniline külmik Liebherr LKUv 1613, mille sisse on võimalik paigaldada vaikseltsulguvatel siinidel alumiinium või plastik sahtlikomplekti.



Ravimikapp on toodetud kvaliteetsest melamiinist. Fassaadiks võib valida nii tavalise ukse (vasak/parem), kui ka ruumi-säästva ruloo. Kapi keskel asub väljatõmmatav abipind. Riiulite, sahtlite ja korvide koormustaluvus on 20kg.

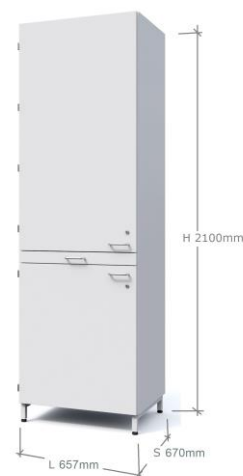

Standarvalikus saab valida viie erineva viimistluse vahel:



Ravimikapp MLK-65F standarlahendus sisaldab:

- 19mm paksune melamiinist korpus ja uksed
- Tarvikute riputuskonks kapi laes
- Kirkast pleksiklaasist ja kõrguses reguleeritavad taskud ülemise ukse sisepinnas, koos vahejagajatega
- Väljatõmmatav abipind kuulsiniidel
- Ülemises osas neli klaasist riiulit, kõrguses reguleeritavad
- Ülemises osas lukustatav seif, valge RAL9010
- Alumises osas meditsiiniline külmik Liebherr LKUv 1613, mille sisse on võimalik paigaldada vaikseltsulguvatel siinidel alumiinium või plastik sahtlikomplekti
- LED valgustus kapi ülaosas
- Lukud kõikidel ustel. Lukke saab sarjastada vastavalt soovile, nii et need ühilduvad teiste sama toa, korruse vms tsooni kappidega. Baasvalikus on mehaaniline mõõblilukk, võib valida ka elektroonilise kooduluku või kiipkaardiga luku vahel
- Silikoonmagnetid ustel – vaikne sulgumine
- Tugev metallist jalaraam reguleeritavate otsikutega, värv valge RAL9010



RAVIMIKAPP MLK-65F

